

# Goldmarker

## Zubehör für die bildgestützte Strahlentherapie



### Goldmarker

Visualisierung von Körperregionen für die externe Strahlentherapie und HDR-Brachytherapie.

Zwei Goldmarkertypen in vorgeladenen und mit Knochenwachs verschlossenen Nadeln.

#### Unterstützung der bildgestützten Strahlentherapie

Goldmarker verbessern die Visualisierung des Zielgebiets bei externen Strahlentherapie- und Brachytherapieverfahren. Die Platzierung von Markern in Weichgewebe oder Organen im Vorfeld der Bestrahlung ermöglicht eine klarere Identifizierung der Anatomie um eine vorgesehene Behandlungsregion und kann folglich die Dosisverteilung im Zielgebiet verbessern.

#### Zwei Goldmarkertypen

Eckert & Ziegler BEBIG bietet zwei Markertypen an: Eckert & Ziegler BEBIG Goldmarker und Mick® Goldmarker. Die Eckert & Ziegler BEBIG Goldmarker sind die neueste Ergänzung des Firmenportfolios und haben einen Griff mit einer strukturierten Oberfläche zur Erleichterung der Nadeleinführung.

#### Verschiedene Längen und Durchmesser

Je nach Anforderungen und Zielgebiet können Kunden zwischen zwei Markertypen in verschiedenen Größen wählen. Die Goldmarker sind in den Längen 3,0 mm und 5,0 mm sowie mit Durchmessern von 1,2 mm und 1,0 mm erhältlich. Die Lieferung erfolgt in einer 17- oder 18G-Nadel. Alle Marker sind aus massivem Gold gegossen und ermöglichen eine Visualisierung unter Fluoroskopie, Röntgen, CT, MRT, Ultraschall und anderen Bildgebungsmodalitäten.

#### Sterile Einzelverpackungen erhältlich


Je nach benötigter Anzahl können die Goldmarker einzeln verpackt oder in Sets à drei Stück pro Sterilverpackung bestellt werden.

#### Bereit für den sofortigen Einsatz

Die Goldmarker sind in mit Knochenwachs verschlossenen Nadeln vorgeladen. Alle Marker werden steril versandt und sind nach dem Öffnen der Verpackung sofort gebrauchsfertig.

#### Goldmarker – Merkmale

- Vorgeladen in einer mit Knochenwachs verschlossenen Nadel
- Erhältlich in verschiedenen Durchmessern: 1,0 mm oder 1,2 mm
- Erhältlich in verschiedenen Längen: 3,0 mm oder 5,0 mm

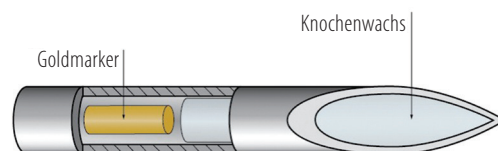

Goldmarker sind jeweils einzeln in einer verschlossenen Nadel vorgeladen



**Eckert & Ziegler**  
Wir helfen zu heilen.

# Goldmarker

## Mick® Goldmarker<sup>1</sup> – Größen und Verpackungseinheiten

Artikelnr.	Nadel	Markergröße	Verpackung
1421-0303	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Einzel verpackt
1421-0304	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Set à 3 Stück
1421-0305	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Einzel verpackt
1421-0306	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Set à 3 Stück
1421-0307	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Einzel verpackt
1421-0308	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Set à 3 Stück
1421-0309	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Einzel verpackt
1421-0310	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Set à 3 Stück

## Eckert & Ziegler BEBIG Goldmarker<sup>2</sup> – Größen und Verpackungseinheiten

Artikelnr.	Nadel	Markergröße	Verpackung
1451-0303	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Einzel verpackt
1451-0304	17G x 20 cm	1,2 x 3,0 mm	Set à 3 Stück
1451-0305	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Einzel verpackt
1451-0306	17G x 20 cm	1,2 x 5,0 mm	Set à 3 Stück
1451-0307	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Einzel verpackt
1451-0308	18G x 20 cm	1,0 x 3,0 mm	Set à 3 Stück
1451-0309	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Einzel verpackt
1451-0310	18G x 20 cm	1,0 x 5,0 mm	Set à 3 Stück

Mick ist eine Schutzmarke der Eckert & Ziegler BEBIG GmbH und ihrer Tochterunternehmen.

Die aufgeführten Produkte sind nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen Eckert & Ziegler BEBIG-Vertreter.

### Manufacturer:

#### <sup>1</sup> Theragenics Corporation

5203 Bristol Industrial Way  
Buford, GA 30518  
USA

#### <sup>2</sup> Riverpoint Medical

825 NE 25th Avenue  
Portland, OR 97232  
USA

### Regionaler Vertrieb, Marketing und Service:

Europa, Mittlerer Osten, Afrika,  
Lateinamerika, Asien-Pazifik

#### Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Robert-Rössle-Str. 10  
13125 Berlin  
Deutschland

Telefon +49 30 94 10 84 130  
Fax +49 30 94 10 84 112  
info@bebig.com

Nordamerika

#### Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. Ein Eckert & Ziegler BEBIG Unternehmen

521 Homestead Avenue  
Mount Vernon, NY 10550  
USA

Telefon +1 914 667 3999  
Fax +1 914 665 8834  
sales@micknuclear.com

www.bebig.com  
www.micknuclear.com